

→ **ORMED MOTO** ←

ORMED

АППАРАТ ДЛЯ АКТИВНОЙ, ПАССИВНОЙ
И АКТИВНО-ПАССИВНОЙ МЕХАНОТЕРАПИИ
ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

СТАНДАРТЫ ОСНАЩЕНИЯ
788Н, 878Н, 928Н, 90Н, 92Н, 665Н



→ Возвращаем радость движения шаг за шагом! ←

ORMED MOTO – универсальный тренажёр, позволяющий проводить успешную реабилитацию пациентов в максимально короткие сроки. Имеет широкую сферу применения: неврология, кардиология, травматология, ортопедия, спортивная медицина, геронтология. Может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Подходит для терапии пациентов в инвалидных креслах.

- Способность работать в режиме велоэргометра.
- Технология биологической обратной связи.
- Электронная регулировка аппарата под пациента.
- Небольшие габариты и вес, возможность использования в обычном помещении.
- Большой сенсорный экран и интуитивно понятное управление через дисплей.
- Возможность корректировки упражнений пультом управления в процессе тренировки.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- болезни нервной системы (рассеянный склероз, паралич, постинсультное состояние, ДЦП и другие);
- последствия травм позвоночника и конечностей;
- патологии опорно-двигательного аппарата;
- заболевания суставов;
- восстановление после операций;
- осложнения, возникшие на фоне малоподвижности и длительного постельного режима.

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- восстановление мышечной силы;
- нормализация координации движений;
- восстановление подвижности суставов;
- уменьшение контрактур и снижение спастичности;
- улучшение кровообращения;
- укрепление сердечно-сосудистой системы;
- улучшение пищеварения и обмена веществ;
- улучшение психоэмоционального состояния.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

«ORMED-Moto MS010» – для верхних и нижних конечностей;
«ORMED-Moto MS020» – для нижних конечностей;
«ORMED-Moto MS030» – для верхних конечностей.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ «ORMED MOTO»

● ПАССИВНЫЙ

Подходит для расслабления и регулировки тонуса мускулатуры, проработки суставов и мобилизации после долгих перерывов.

● АКТИВНЫЙ

Укрепляет мускулатуру, повышая силу, координацию и выносливость, улучшает работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

● ФУНКЦИЯ «АССИСТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА»

Система управления аппарата автоматически подстраивает скорость под возможности пользователя.

● ФУНКЦИЯ «ИЗОКИНЕТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ»

Аппарат автоматически подстраивает нагрузку под возможности пользователя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

● ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ С ШИРОКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ

Настройка нагрузки индивидуально для каждого пользователя. Автоматическое переключение между активным и пассивным режимами в зависимости от активности пользователя. Контроль тугоподвижности (в начале, в середине, в конце тренировки).




● БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Отображение параметров и результатов тренировки на дисплее аппарата. Распознавание спазматического состояния с возможностью настройки уровня. Выбор направления вращения после срабатывания защиты от спастики.



● ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Интуитивно понятный интерфейс, возможность легко менять параметры тренировки через сенсорный дисплей.

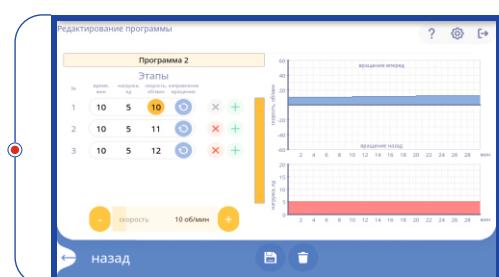


● ФУНКЦИЯ «АССИСТЕНТ УСТАНОВКИ КОНЕЧНОСТЕЙ»

Приводит педали и рукоятки в удобное для пациента положение до начала и после окончания тренировки для правильного расположения ног и рук.


● ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ТРЕНИРОВОК

Возможность вносить корректировки в предустановленные программы и создавать собственные тренировки.

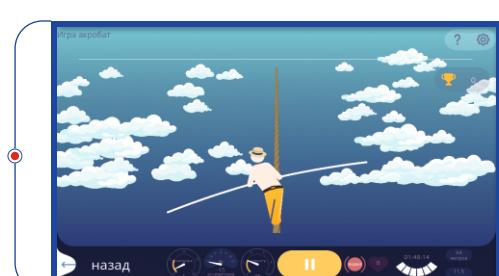

● МОТИВАЦИОННЫЕ ИГРЫ

Помогают сделать долгий процесс тренировок более увлекательным и дополнительно замотивировать пациентов, что особенно важно в детской реабилитации.

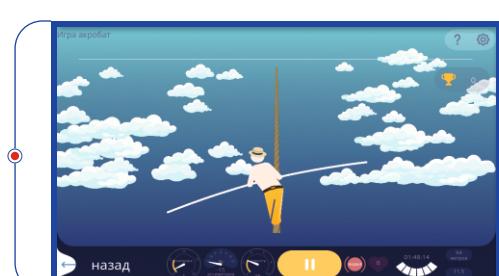

ORMED MOTO В ДЕТАЛЯХ




Манжеты из неопрена надежно и мягко фиксируют кисти рук во время тренировки



Съемные вертикальные и горизонтальные рукоятки для верхних конечностей предназначены для проработки разных групп мышц



Продуманная конструкция модуля нижних конечностей позволяет быстро и надежно зафиксировать ноги пациента

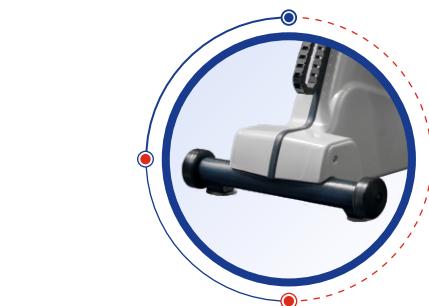

Транспортировочные колеса обеспечивают легкость перемещения аппарата внутри помещения



Чип-карта пациента помогает аппарату автоматически подстроиться под его параметры и загрузить индивидуальную программу тренировки



Датчик сердечного ритма дает возможность автоматически изменять программу при превышении допустимой ЧСС



Веб-камера обеспечивает связь пациента с врачом на расстоянии и позволяет контролировать реабилитацию дистанционно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ORMED Moto»

● диапазон изменения нагрузки верхних и нижних конечностей	0-120 N по 20 уровням
● диапазон регулировки оборотов:	в пассивном режиме 2-60 об/мин в активном режиме 2-100 об/мин
● радиус вращения рукояток	75 мм, 110 мм
● радиус вращения педалей	75 мм, 100 мм, 125 мм
● время тренировки	0-180 мин
● максимальная масса пациента	135 кг
● габаритные размеры (ДxШxВ)	710x510x1060 мм
● масса аппарата	42 кг
● электропитание	220 В, 50 Гц
● время непрерывной работы	не менее 8 ч

Завод-изготовитель: Научно-внедренческое предприятие «Орбита»

📞 +7 (347) 227-54-00, 8-800-700-86-96
✉️ ormed@ormed.ru
📍 Россия, 450095, РБ, г. Уфа, ул. Центральная, 53/3

🌐 www.ormed.ru
VK vk.com/ormedtm
Instagram ormedorbita